



mantisitalia.it

La soluzione più
efficace per l'epilazione
progressiva **permanente**

HR 808
Diode Laser



HR 808
Diode Laser

La soluzione più **efficace** per l'epilazione progressiva **permanente**

Il laser a Diodo HR 808 è il miglior alleato dell'epilazione.

HR 808, prodotto **100% Made in Italy**, rappresenta a livello **mondiale il gold standard nell'epilazione laser**, potendo vantare una tecnologia tra le più innovative ed avanzate. Il manipolo di HR 808 è progettato per operare con la massima efficienza, riuscendo a coniugare un'estrema leggerezza con la massima resa in termini di prestazioni e risultati. Inoltre, l'esclusiva tecnologia ACS e TMS di Mantis riesce a prevenire eventuali fermi indesiderati durante il trattamento, garantendo la migliore efficacia possibile in qualunque condizione.



“

*Una tecnologia
importante, un laser
che unisce **funzionalità
innovative**
e un **design unico**.*





INNOVATIVO

L'innovazione di Mantis HR 808 è caratterizzata da **due nuovi sistemi, ACS e TMS**, che garantiscono performance assolute **nella più totale sicurezza**.



SICURO

I test effettuati presso i laboratori Mantis hanno dimostrato l'**assenza di controindicazioni**, sia nel breve che nel lungo periodo.



INDOLORE

L'esclusivo sistema di raffreddamento, unito alla possibilità di regolare i parametri in base alla zona trattata, fanno sì che il trattamento risulti **efficace e confortevole**.



EFFICACE

La tecnologia di HR 808 soddisfa i professionisti più esigenti grazie agli **ottimi risultati, visibili fin dal primo trattamento**.



VELOCE

HR 808 garantisce **ottime performance in tempi rapidissimi**.



ECONOMIA

Grazie alla qualità e l'efficacia della nostra sorgente luminosa riusciamo a garantire un lungo ciclo di vita del diodo.

Come funziona


La luce emessa dal laser - monocromatica, unidirezionale e coerente - viene assorbita in modo mirato e, grazie al processo di fototermolisi selettiva, determina l'innalzamento termico del bulbo pilifero, deteriorandone le cellule germinative e inibendo la ricrescita del pelo.

Cooling system

Il raffreddamento del manipolo risulta estremamente efficace grazie all'efficiente sistema a celle di Peltier. Garantisce infatti un elevato livello di comfort, anche nelle zone più sensibili del corpo.

perché ACS e TMS fanno la differenza



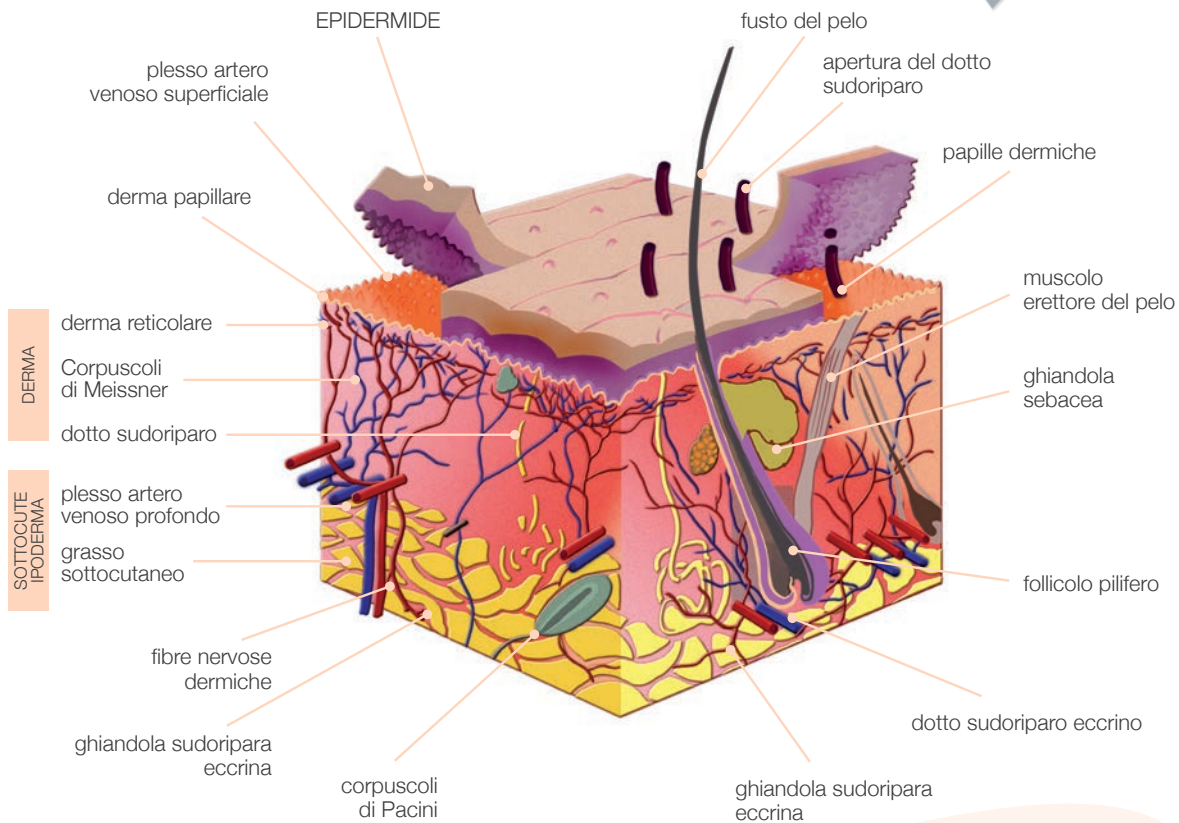

L'epidermide

L'emissione laser penetra gli strati superiori della pelle e trasferisce la sua energia al pelo; l'energia assorbita dalla melanina presente nel pelo viene convertita in calore, danneggiando il follicolo pilifero.

Con Mantis HR 808 è possibile effettuare trattamenti su ogni fototipo in qualsiasi periodo dell'anno, senza particolari controindicazioni.

La nostra ricerca scientifica ci ha portati a superare i limiti delle tradizionali tecnologie a sorgente luminosa, offrendo trattamenti mai raggiunti prima.

Nuovo Sistema di Raffreddamento

ACS
Active Cooling System

La capacità termica della sorgente laser è potenziata dal sistema di raffreddamento ACS - Active Cooling System, garantendo tempi di trattamento praticamente illimitati e innalzando la capacità termica di tutto il sistema laser.

TMS
Thermal Management System

Il software effettua il controllo elettronico della temperatura e la rilevazione dei flussi dell'acqua, consentendo di prevenire i guasti più frequenti che si verificano nei sistemi laser meno evoluti.





Trattamenti sicuri su ogni fototipo, risultati rapidi e indolori.

La tecnologia Mantis HR 808 permette di lavorare in estrema sicurezza ed efficacia su tutti i tipi di pelle.

ft1

Pelle chiara
Capelli rossi o biondo chiaro
Numerose efelidi



ft4

Pelle olivastra
Capelli castani

ft2

Pelle chiara
Capelli biondi



ft5

Pelle scura
Capelli castano scuro

ft3

Pelle chiara dorata
Capelli biondo scuro
o castano chiaro



ft6

Pelle nera
Capelli neri

Assistenza tecnica da remoto

Mantis garantisce su tutti i suoi dispositivi un supporto tecnico a distanza, attraverso la connessione internet, per un intervento costante ed efficace.



Mantis HR 808: un alleato affidabile

Sono sempre più numerosi i professionisti del settore medico-estetico che hanno scelto **HR 808, la tecnologia laser di Mantis** che ha rappresentato una vera e propria svolta nell'epilazione progressiva permanente.



Teresa Guarino
*Scuola di Estetica
Liliana Paduano
Napoli*

“Una tecnologia importante, un laser che unisce funzionalità innovative e un design unico.

La seduta è veloce ed indolore, il manipolo ultra leggero, ma soprattutto ciò che lo rende perfetto è l'innovativo sistema di raffreddamento grazie al quale riusciamo ad effettuare lunghi periodi continui di trattamento senza incorrere in fastidiosi blocchi della macchina. ”



Prof. Francesco d'Andrea
*IMED
Istituto Medico D'Andrea
Napoli*


“ Sono rimasto molto colpito delle prestazioni di HR 808!

Ci ha permesso da subito di offrire ai nostri pazienti un trattamento di epilazione laser nel massimo comfort e sicurezza grazie anche al suo sistema di raffreddamento dinamico! Quando si riesce a garantire sempre il miglior risultato nel massimo comfort ai propri pazienti si ha ogni giorno la conferma di aver fatto la scelta giusta!”

I nostri risultati sono i vostri successi!

Gli studi clinici hanno evidenziato risultati eccellenti nella rimozione dei peli nelle aree trattate.

80% nei primi 6 mesi
90% il primo anno

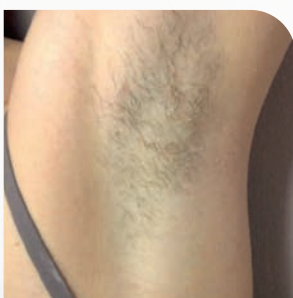

Prima



Dopo



Prima



Dopo

CARATTERISTICHE TECNICHE

HR 808
Diode Laser



Laser

Diodo ad alta potenza

Sorgente

900W

Lunghezza d'onda

808 nm

Profilo di fascio

Omogeneo, superficie piatta

Fluenza

Single shot 5 - 40j/cm² - comfort 6 - 40j/cm² - regular 6 - 40j/cm²

Frequenza

Single shot 1hz - comfort 1-6hz - regular shot 1-15hz

Ampiezza dell'impulso

10 - 300 ms

Raffreddamento

Sistema di raffreddamento a gas ad alta capacità

Dimensione macchina

60 x 60 x 130 cm

Peso


Peso: 50 kg

Collegamenti elettrici

220V/50HZ - 110V/60HZ

Dimensione spot

10 mm x 12 mm (zaffiro)

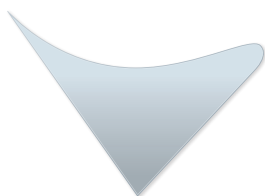

MANTIS


SCIENCE & TECHNOLOGY



Mantis Srl

Via Artigianale Croce, 13
42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - Italy
Tel +39 0522 612080
Fax +39 0522 729796
info@mantisitalia.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO



mantisitalia.it

